


Перенос xDrip-мастера с одного Андроид на другой Андроид со всей историей и настройками.

- Для удобства буду называть мастер-телефон на базе Андроид, с установленным xDrip «Андроид старый», а телефон, на который нужно перенести xDrip «Андроид новый».
- Подразумевается, что на старом Андроиде, в момент переноса, xDrip настроен и работает без нареканий. А на новом Андроиде уже установлен xDrip (такой же версии, что и на старом. Потом можно обновить, если необходимо)
- Эта процедура понадобится тому, кто по какой-то причине решил заменить мастер-телефон на новый (другой).

ШАГ 1. Откройте xDrip на старом Андроиде.

ШАГ 2. Сохраняем текущие настройки в отдельный файл настроек: Левый верхний угол → Настройки → Загрузить/Сохранить настройки → Сохранить все настройки в файл настроек


Файл настроек `com.eveningoutpost.dexdrip_preferences.xml` будет располагаться в Загрузки – xDrip-export:
`/storage/emulated/0/Download/xDrip-export`

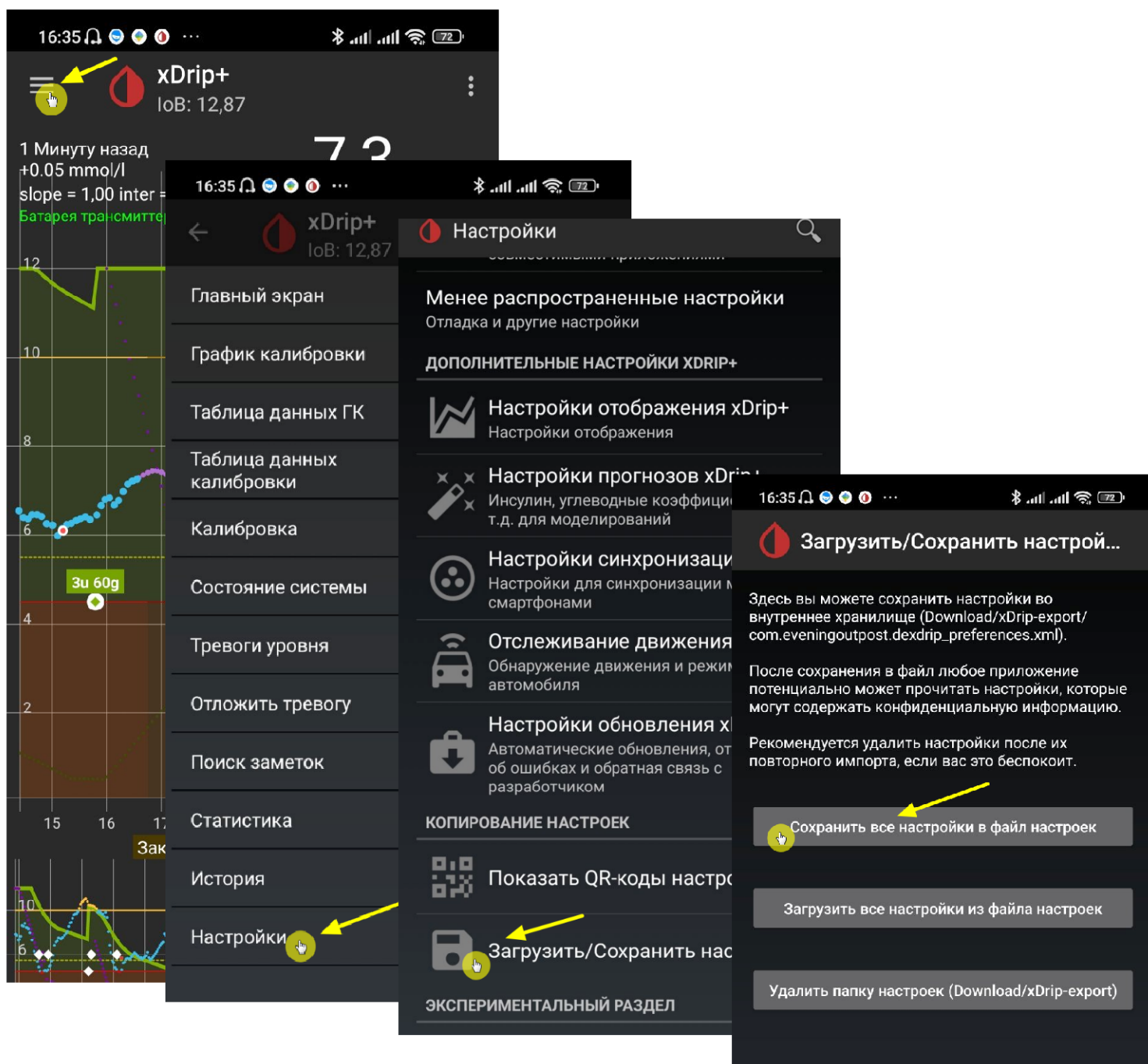

ШАГ 3. Сохраняем всю историю показаний и терапии в отдельный zip-архив.

Правый верхний угол → Функции импорта/экспорта → Экспорт базы данных

Файл zip-архив со всей историей по умолчанию сохраняется в корне системы: **storage/emulated/0/xdrip**
И имеет вид: **export20231129-170912.zip** (т.е. имя содержит текущую дату и время)

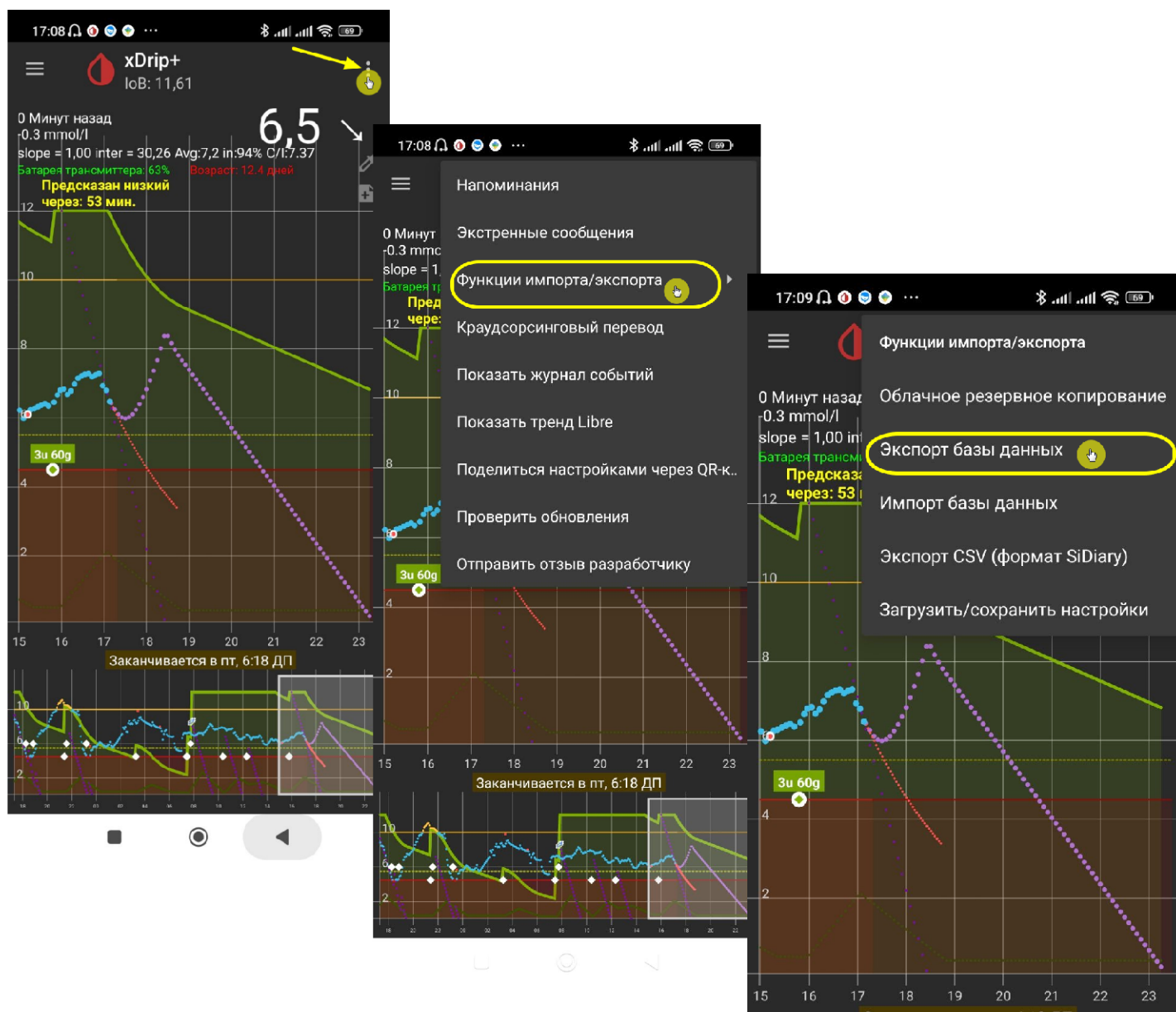

ШАГ 4. Переносим экспортированные файлы на новый Андроид.

Любым удобным способом* нужно скопировать файлы, которые только что были экспортированы из старого Андроида в новый Андроид и разместить их в такие же папки, что и на старом Андроиде.

- файл настроек **com.eveningoutpost.dexdrip_preferences.xml** помещаем в папку **/storage/emulated/0/Download/xdrip-export** на новом Андроиде
- архив с историей показаний и терапии **export20231129-170912.zip** помещаем в папку **storage/emulated/0/xdrip** на новом Андроиде

Даже если этих папок на новом Андроиде пока нет, просто создаём их.

*- например, используйте ПО для передачи файлов, например ShareMe, SHAREit и т.п. ИЛИ воспользуйтесь подключением к компьютеру по кабелю для переноса этих файлов со старого на новый Андроид.


ШАГ 5. Открываем xDrip на новом Андроиде.

Файлы настроек и истории уже должны быть перенесены на свои места в новом телефоне.

ШАГ 6. Импортируем настройки на новый Андроид.


Повторяем все действия из ШАГ 2, на последнем этапе выбираем **ЗАГРУЗИТЬ....**:

Левый верхний угол → Настройки → Загрузить/Сохранить настройки → **ЗАГРУЗИТЬ** все настройки из файла настроек

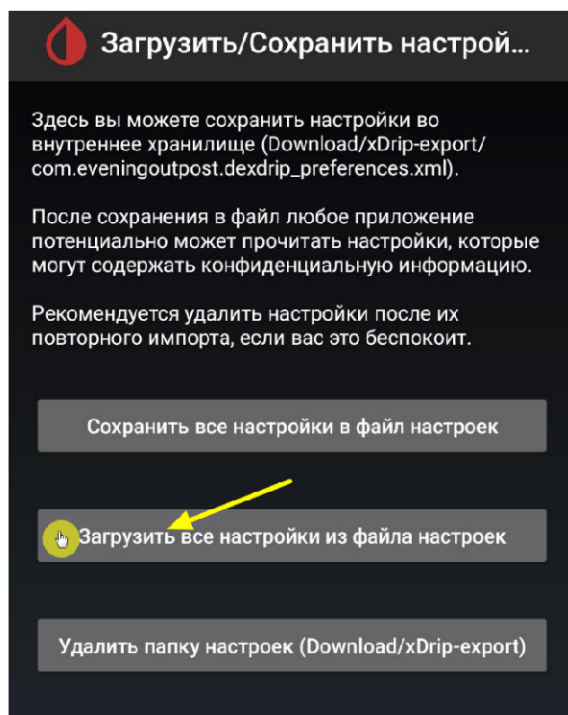

ШАГ 7. Импортируем историю на новый Андроид.

Повторяем все действия из ШАГ 3, на последнем этапе выбираем **ИМПОРТ** базы данных:

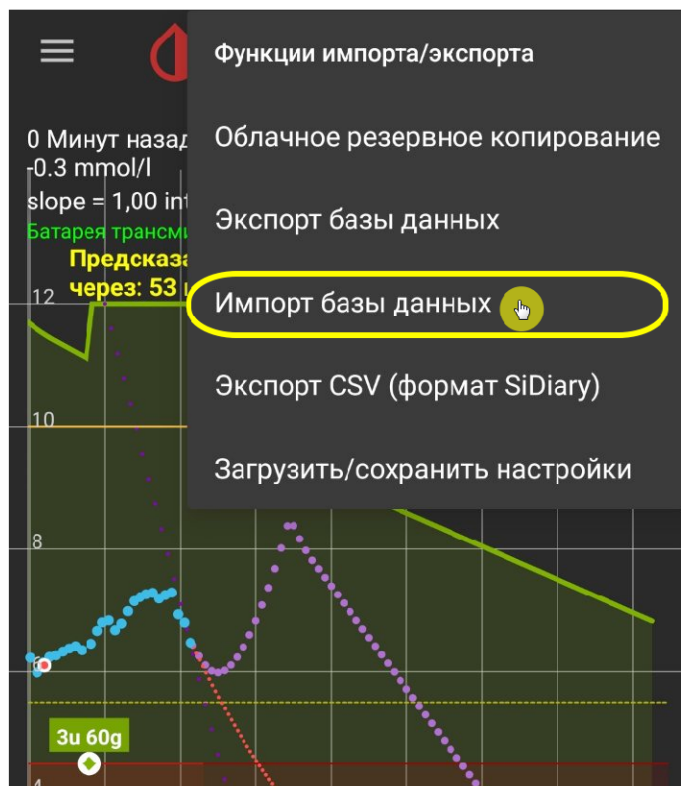

ШАГ 8. Включаем оба телефона, запускаем xDrip на обоих и начинаем пошагово сверять **ВСЕ** настройки в новом Андроиде с настройками из старого Андроида.

Всё должно работать как и на старом Андроиде. Пользуйтесь и будьте здоровы!